

Aparat pentru curatare faciala cu afisaj LCD si 4 moduri de lucru Skin Cleaner

Un produs destinat pentru curatarea si intretinerea tenului.

Elimina punctele negre, acneea si celulele moarte datorita vibratiilor cu ultrasunete cu frecventa de 28.000 impulsuri pe secundă. Cu ajutorul acestui aparat porii sunt curatati si micsorati iar ridurile sunt vizibil redus.

Functii:

- ✓ elimina sebumul in exces din pori
- ✓ improspateaza pielea si imbunatateste textura acesteia
- ✓ estompeza petele pigmentarea
- ✓ minimalizeaza porii
- ✓ creste elasticitatea pielii.

Descrierea produsului




- **Up** – cresterea intensitatii;
 - **Down**- scaderea instensitatii;
 - **Mode**- 4 moduri de lucruri -peeling,
 - ultrasunete,
 - curatare,
 - netezire.
 - **Select**- selectarea modului de lucru – val continuu;
 - unde de impuls
 - val de combinatie
- Power**- buton on/off.

Mod de functionare

- Conectati adaptorul la sursa de alimentare;
- Porniti aparatul actionand butonul Power situat in partea frontala;
- Aparatul porneste in modul val continuu;
- De la butonul Select puteti schimba modul de lucru al aparatului;
- Cu ajutorul butoanelor UP and DOWN puteti creste sau scadea instensitatea de lucru;
- Timpul initial de tratament este de 15 min/ ora.


Ghid de operare

- Porniti aparatul cu ajutorul butonului Power. (setarea implicita este val continuu si iesire mai mica);
- Ajustati iesirea valurilor si intensitatii pentru fiecare problema in parte (valul combinat este ideal pentru persoane cu piele sensibila);
- Curatati pielea aplicand o lotiune tonica sau apa micelara;
- Pozitionati aparatul pe piele cu un unghi de inclinare de 45 de grade.
- Reglați intensitatea de ieșire în funcție de cerința de tratament.
[Observație: păstrați pielea hidratată în timpul întregului tratament.]

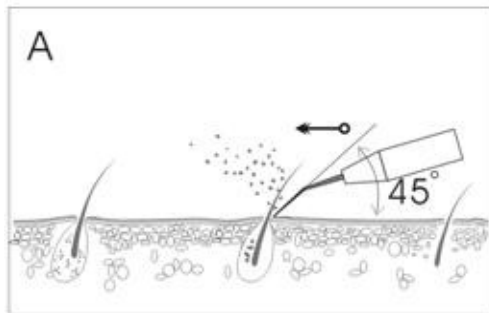


A. Inlatura acneea fara durere

Acneea din pori este atomizată într-o perioadă scurtă de timp prin vibrații ultrasonice și apoi acneea este îndepărtată în timpul curățării pielii

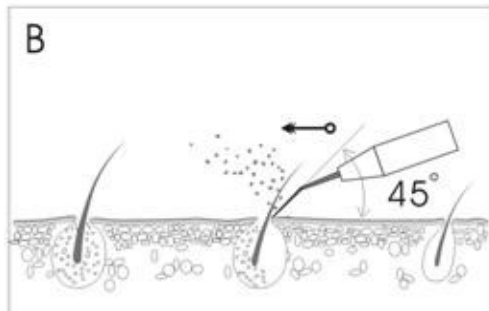

B. Indepartarea petelor pigmentare.

Îndepărtarea petelor pigmentare și a rezidurilor produselor cosmetice prin frecvența vibrațiilor ultrasonice de 28K.

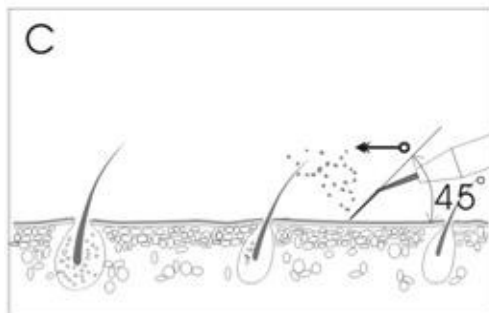

C. Curățarea pielii

Lama este sigură pentru curățarea tenului de impuritati. Prin vibrații eficiente, efectul de curățare este evident.

5. Curățați pielea cu apă după tratament.

6. Curățați lama și apoi sterilizați-o cu alcool.

ATENȚIE

1. Aparatul este ideal pentru piele uscata sau grasa. Pielea va fi revigorata dupa un tratament pe termen lung.
2. Cand doriti sa curatati pielea, valul continuu este cea mai buna alegere pentru dvs.
3. Pastrati sonda curata si lama sterilizata, inainte de dupa tratament;
4. utilizati aparatul cu grija in jurul ochilor sau in caz de rani.
5. Nu tineti aparatul nemiscat pe ten, acesta trebuie sa se miste incontinuu.
6. Nu utilizati aparatul daca acesta este deteriorat;
7. Pastrati sonda inclinata la unghi de 45 grade
8. Nu se recomanda sa fie folosit de femei insarcinate, copii sau persoane cu probleme psihice.